

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

Pikaopas potilaille

Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal -testiä käytetään. On tärkeää, että luet potilaille suunnatut käyttöohjeet ennen testin tekemistä.

IVD

CE



Tärkeää tietoa turvallisuudesta

Varoitus!


- Pese kätesi saippualla ja vedellä tai käytä käsihuhdetta ennen testin suorittamista ja sen jälkeen.
- Pidä näytetikku puhtaana. Älä kosketa näytetikon kärkeä, ja varmista, että se ei joudu kosketuksiin pintojen kanssa ennen käyttöä.
- Käytä testisarjaa vain kerran.
- Vältä kosketusta ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin vahingossa tapahtuu, huuhtelee hyvin ihoärsytyksen välttämiseksi. Jos olet huolissasi asiasta, ota yhteyttä lääkäriin. Jos nestettä läikky, puhdista se huolellisesti sopivalla desinfiointiaineella.
- Älä käytä mitään testin osaa kehossasi lukuun ottamatta testisarjaan sisältyvää näytetikkuä. Älä niele mitään osia.

Testisarjan osat

Pussi **1**, joka sisältää testivälineen ja kuivausainepakkauksen (x5)

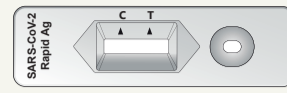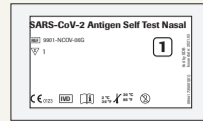


Pussi **2**, joka sisältää 5 nestettä sisältävää putkea ja 5 tippakorkkia (x1)

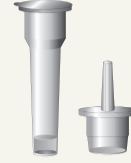

Steriili näytetikku



Putkipidike

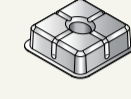

Tarvitavat materiaalit, jotka eivät sisälly toimitukseen:


- Ajastin
- Nenäliina

1 Testin valmistelu

1. Lue potilaille suunnatut SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal -testin käyttöohjeet huolellisesti.
2. Pese kätesi saippualla ja vedellä tai käytä käsihuhdetta ennen testin suorittamista.




3. Tarkista viimeinen käyttöpäivä foliopussin takapuolelta. Älä käytä testiä, jos viimeinen käyttöpäivä on mennyt.

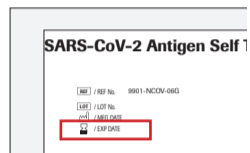


4. Avaa yksi foliopusseista **1** repäisemällä repäisyviivaa pitkin ja ota testiväline ja kuivausainepakkaus ulos.

5. Varmista, että testiväline on ehjä eikä kuivausainepakkauksessa ole vihreitä rakeita. Älä avaa kuivausainepakkausta.

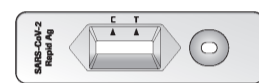


2 Nenänäytteen ottaminen ja valmisteleminen

1. Avaa foliopussi **2** repäisemällä repäisyviivaa pitkin ja ota ulos yksi nestettä sisältävä putki ja yksi tippakorkki. Aseta ne pöydälle.
2. Avaa putken sinetti varovasti läikyttämättä putken sisällä olevaa nestettä. Aseta putki putkipidikkeeseen.

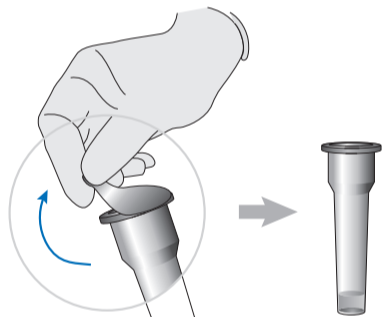


3. Niistä nenäsi kerran nenäliinaa käyttämällä.
4. Ota näytetikku pakkauksesta. Varmista, että kosketat vain näytetikon vartta, etkä kärjen pehmeää tyynyä.

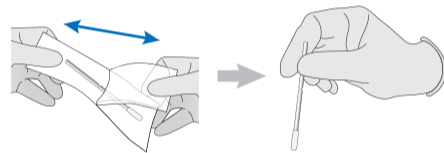


5. Kallista päätäsi hieman taakse.
6. Vie näytetikku tyynypää edellä vasempaan sieraimen. Liu'uta näytetikku hitaasti noin 2 cm eteenpäin (suuontelon katon suuntaisesti, ei ylöspäin), kunnes tunnet vastusta. Älä kohdistaa näytetikkuun painetta.

7. Kierrä näytetikkuä 4 kertaa (yhteensä noin 15 sekunnin ajan) nenäseinämää vasten ennen sieraimesta poistamista.
8. Toista vaiheet 6 ja 7 oikeassa sieraimessa samalla näytetikulla.
Huomaa: Näytteet on kerättävä molemmista sieraimista samalla näytetikulla.

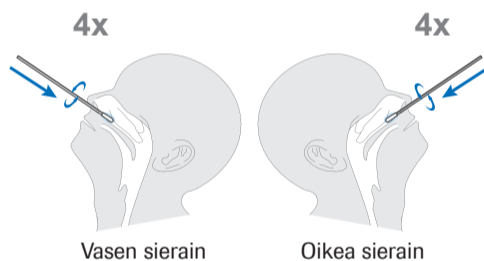


9. Työnnä näyteputkea putkeen, kunnes pehmeä tyyny on nesteessä. Purista putkea pohjasta ja pidä siitä tiukasti kiinni. Pyöritä näytetikkuä yli 10 kertaa, jotta biologinen materiaali siirtyy näytetikusta nesteeseen.
10. Vedä näytetikkuä ulos putkesta painaen samalla putken sivuista niin, että neste puristuu pois näytetikusta. Hävitä näytetikku ja sulje putki tiukasti tippakorkilla.

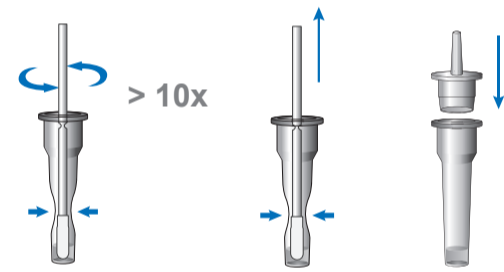

VAROITUS! Jos putkea ei puristeta, tuloksena voi olla väärä tulos, koska näytetikussa on liikaa puskuria.

3 Testin suorittaminen

1. Aseta testiväline tasaiselle pinnalle.
2. Pitele putkea pystyssä alla olevassa kuvassa merkityn pyöreän altaan yläpuolella (ei suorakulmisen tulosikkunan yläpuolella).
3. Lisää tarkalleen 4 tippaa pyöreään altaaseen. Purista tarvittaessa putken seiniä varovasti yhteen.
Huomaa: Voit jatkaa testiä, vaikka lisäksi vahingossa 5 tippaa testivälineeseen.

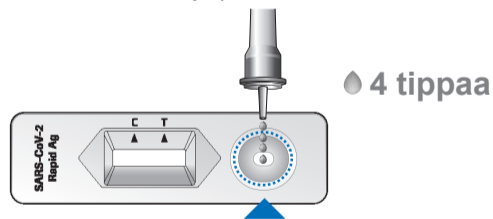

4. Aseta ajastin ja lue testitulokset 15–30 minuutin kuluttua.


VAROITUS! Testitulokset, jotka luetaan ennen kuin on kulunut 15 minuuttia tai kun on kulunut yli 30 minuuttia, voivat olla virheellisiä.



5. Pese kätesi saippualla ja vedellä tai käytä käsihuhdetta testin suorittamisen jälkeen.

4 Tulosten tulkitseminen


Virheellinen testitulos

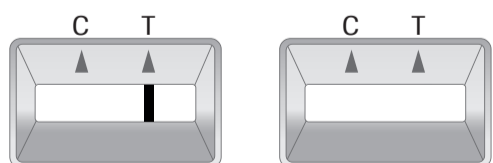

1. Jos kontrolliviivaa (C) ei näy, tulos on katsottava kelpaamattomaksi. Testi ei toimi oikein, ja sinun tulee tehdä toinen testi käyttämällä toista testisarjaa.

Olet saattanut suorittaa testin väärin. Lue käyttöohjeet huolellisesti ja toista testi. Jos testitulos on edelleen virheellinen, ota yhteys lääkäriin tai COVID-19-testauskeskukseen.

Positiivinen testitulos

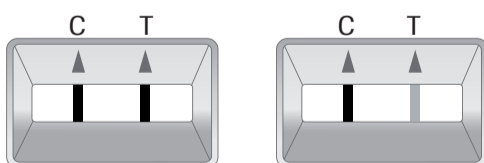


2. Jos kontrolliviivan (C) lisäksi näkyy testiiviiva (T), tulos on positiivinen.

Katso tulosta tarkasti. Testi katsotaan positiiviseksi, jos kaksi viivaa on näkyvissä – vaikka ne olisivat heikkoja.

Positiivinen testitulos tarkoittaa, että on erittäin todennäköistä, että sinulla on COVID-19. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin / perusterveydenhuollon lääkäriin tai paikalliseen terveysviranomaiseen ja noudata paikallisia omaehtoista eristystä koskevia ohjeita. Lääkäri voi vaatia, että sinulle tehdään PCR-testi tuloksen vahvistamiseksi.

Negatiivinen testitulos

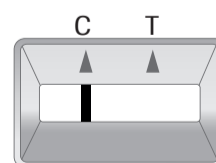

3. Jos kontrolliviiva (C) on näkyvissä (riippumatta siitä, kuinka heikko se on) ja testiiviiva (T) ei ole näkyvissä, tulos on negatiivinen. On epätodennäköistä, että sinulla on COVID-19.

Vaikka testi on negatiivinen, noudata kaikkia hygienia- ja turvallisuustoimenpiteitä.

Jos epäilet, että sinulla on infektio (eli jos sinulla on pitkään jatkuneita oireita tai jos oireesi pahenevat), ota yhteyttä lääkäriin / perusterveydenhuollon lääkäriin. Sinulla voi olla eri infektio tai testitulos voi olla väärä. Voit toistaa testin 1–2 päivän kuluttua, koska COVID-19:ää ei voida todeta täysin tarkasti infektioiden kaikissa vaiheissa.

SD Biosensor, Inc.
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
KOREAN TASAVALLA
Valmistusmaa: Korea

EC PREP

Valtuutettu edustaja:
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert, Germany

Jälleenmyyjä:
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Germany
www.roche.com

Asiakirjan versio: Alustava versio
Tarkistuspäivämäärä: Huhtikuu 2021
© 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

0 09437851001 (01) 2021-04 FI